

HI-TORQUE WHISPER проводники с полимерным покрытием

Простой доступ к самым извитым поражениям

Тактильная обратная связь при дистальном доступе

Первый проводник семейства HI-TORQUE WHISPER был выпущен в 2001 году. Семейство Whisper представляет собой гидрофильные полимерные проводники с уникальной оплеткой под полимерным покрытием. Дизайн соединения сердечник-наконечник обеспечивает улучшенную пластичность и тактильное взаимодействие. Эти характеристики, наряду с гибкостью и атравматичным рентгеноконтрастным кончиком, придают проводникам Whisper превосходную управляемость и проходимость.

Безупречное продвижение и надежность

Семейство проводников Whisper также сочетает в себе новые технологии такие, как RESPONSEAS – монолитный параболический наконечник для гладкого прохождения и предотвращения пролапса и DURASTEEL – высоко прочный сердечник из нержавеющей стали для предельно точного управления, надежности и тактильного взаимодействия с инструментом.

HT WHISPER коронарные проводники

HT WHISPER Extra Support (ES)

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА (дюйм)	ДЛИНА ПРОВОДНИКА (см)	ФОРМА КОНЧИКА	РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК (см)
1011834H	HT WHISPER ES	.014	190	Прямой	3
1011834HJ	HT WHISPER ES	.014	190	J-кривизна	3
1011835H	HT WHISPER ES	.014	300	Прямой	3
1011835HJ	HT WHISPER ES	.014	300	J-кривизна	3

HT WHISPER Moderate Support (MS)

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА (дюйм)	ДЛИНА ПРОВОДНИКА (см)	ФОРМА КОНЧИКА	РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК (см)
1005357H	HT WHISPER MS	.014	190	Прямой	3
1005357HJ	HT WHISPER MS	.014	190	J-кривизна	3
1005359H	HT WHISPER MS	.014	300	Прямой	3
1005359HJ	HT WHISPER MS	.014	300	J-кривизна	3

HT WHISPER Light Support (LS)

№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА (дюйм)	ДЛИНА ПРОВОДНИКА (см)	ФОРМА КОНЧИКА	РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ КОНЧИК (см)
1005351H	HT WHISPER LS	.014	190	Прямой	3
1005351HJ	HT WHISPER LS	.014	190	J-кривизна	3
1005353H	HT WHISPER LS	.014	300	Прямой	3
1005353HJ	HT WHISPER LS	.014	300	J-кривизна	3

¹ CHOICE PT Extra Support (TM) - зарегистрированная торговая марка корпорации Boston Scientific и ее филиалов.

Для получения более подробной информации обращайтесь, пожалуйста, к представителю компании в России.

Abbott Vascular International BVBA
Park Lane
Culliganlaan 2B, 1831 Diegem
BELGIUM
Tel: + 32 2 714 14 11
Fax: + 32 2 714 14 12

ООО «Эбботт Лэбораториз» РОССИЯ
141400, Московская область, г. Химки
ул. Ленинградская, владение 39, строение 5
Химки Бизнес Парк
Тел: 8 (495) 258 42 70,
факс: 8 (495) 258 42 71

Изделие предназначено для использования врачом или под его руководством. Очень важно перед использованием внимательно прочесть вложенную в упаковку инструкцию для применения, изучив предостережения и возможные осложнения, связанные с использованием изделия.

Содержащаяся в этом буклете информация предназначена для распространения за пределами США и Японии.

Пожалуйста выясните регистрационный статус изделия перед дистрибуцией в странах, где не имеет силы CE mark – сертификат Европейского Союза.

Более расширенная информация об изделии размещена на сайте: www.abbottvascular.com

© 2007 Эбботт Лэбораториз. Все права защищены. ENQ 1371-20 09/2007

Abbott
Vascular



Упрощенный доступ к поражениям В СИЛЬНО ИЗВИТЫХ СОСУДАХ

Проводник «первой очереди»

Тактильная обратная связь и контроль

Беспрепятственный доступ

HI-TORQUE WHISPER ES коронарные проводники



Abbott
A Promise for Life

Лидерство в технологии создания проводников



25 лет инноваций

25 лет назад, в 1982 году, компания Abbott Vascular выпустила первый управляемый коронарный проводник. С тех пор Abbott Vascular остается на передовых позициях в разработках проводников, сохраняя приверженность к инновациям. Со временем мы внедрили такие новые технологии, как изменяемый атравматичный кончик с формируемым сердечником, различные покрытия для лучшего скольжения, рентгеноконтрастные витки кончика для визуализации и сердечники из различных материалов, обеспечивающих превосходные гибкость, прочность и поддержку.

25 лет лидерства

Эти инновационные технологии, наше партнерство и тесное взаимодействие с врачами помогли нам достичь с годами очевидного лидерства. Наша направленность на образование и поддержку врачей в приобретении необходимых навыков для использования этих технологий также способствовали такому долговременному успеху.

Врачи доверяют Abbott Vascular благодаря нашей приверженности инновациям, нашим высоким стандартам качества и широкому ассортименту проводников практически для любых клинических ситуаций.

Хронология инноваций в технологиях



HI-TORQUE WHISPER ES, Проводник «первой очереди» с дополнительной поддержкой

Облегченная доставка инструментов

Проводник HI-TORQUE WHISPER ES – последнее дополнение к ряду полимерных проводников HI-TORQUE WHISPER. Он предоставляет более высокий уровень поддержки, обеспечивающий более легкую доставку инструментов.

Отличная проходимость и передача вращения


Так же как и HT WHISPER MS проводник ES имеет гидрофильное полимерное покрытие поверх монолитного сердечника RESPONSEASE, который позволяет легко проходить выраженные изгибы и достигать поражения в чрезвычайно извитых сосудах. При этом HI-TORQUE WHISPER ES имеет увеличенный диаметр сердечника, придающий ему повышенный уровень поддержки. Соединение DURASTEEL сердечник-наконечник из высокопрочной нержавеющей стали дает предельно точное управление, чрезвычайную прочность и отличную тактильную обратную связь.

Полимерное покрытие поверх оплетки рентгеноконтрастного кончика для доставляемости в сильно извитые сосуды



Постепенное бесступенчатое увеличение поддержки


ПОДДЕРЖКА

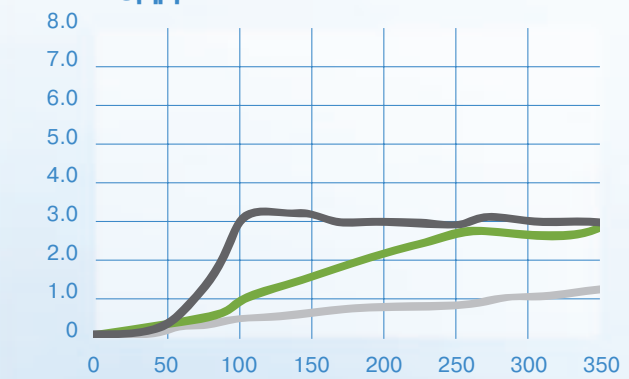

HT WHISPER Extra Support
HT WHISPER MS
CholCE PT Extra Support (TM)¹

Гибкость кончика аналогична HT WHISPER MS

НАГРУЗКА НА КОНЧИК (от 10 мм)

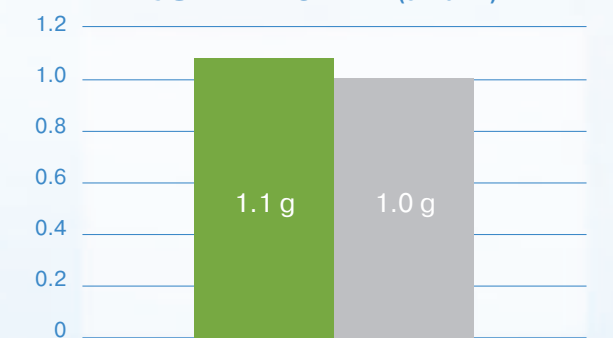

HT WHISPER Extra Support
HT WHISPER MS

