

# 1650™

Пневмо-гидравлический  
операционный стол

Для общей и  
специализированной  
хирургии



ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ

ОДНОДНЕВНАЯ ХИРУРГИЯ

## Пневмо-гидравлический операционный стол

Надежный и экономичный операционный стол 1650 – многие годы один из бестселлеров Merivaara. Сегодня он стал еще более прочным, получив новое более стабильное основание и конструкцию колонны. Новый стол пригоден также для пациентов большего веса и предлагает лучший доступ к зоне операции благодаря усовершенствованному дизайну рычагов управления.

Новый 1650 – достойное экономически выгодное решение для нужд современной хирургии.

### Варианты комплектации

- Разделенная ножная секция
- Узкая / специальная опора для головы
- Дополнительные принадлежности, которые могут быть установлены на боковой рельс, такие, как: опоры для ног, рук, боковые и проч..

### Функциональные особенности

- Flex
- Reflex
- Тренделенбург
- Анти Тренделенбург
- Гидравлическая регулировка высоты
- Пневматическая регулировка секций и бокового наклона





Общая хирургия, ЛОР-хирургия, операция на щитовидной железе



Общая хирургия в латеральном положении, операция на почках на позиции Flex или с помощью отдельной опорой для операции на почках



Лапароскопия



Подготовка позиции на литотомии

## Значительные преимущества для операционной бригады

- Свободный доступ операционной бригады к пациенту
- Сокращение времени операции за счет возможности быстрой укладки пациента
- Совместимость с рентгеновскими установками и С-дугой

### Усовершенствования новой модели по сравнению с предыдущей версией стола 1650:

- Выше безопасная рабочая нагрузка
- Увеличен боковой наклон для лучшего позиционирования пациента
- Повышена стабильность за счет нового дизайна основания и колонны

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к нашему каталогу или сайту:  
[www.merivaara.ru](http://www.merivaara.ru).

## Технические характеристики

### РЕГУЛИРОВКИ

Модульная столешница	4–5 секции
Ширина ложа без боковых рельсов	500 мм
Вес стола	135 кг
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)	180 кг
Максимальная подъемная способность	400 кг

### ГАБАРИТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон регулировки высоты (без матраца)	730–1040 мм
Боковой наклон	± 20°
Тренделенбург	25°
антиТренделенбург	18°
Регулировка спинной секции	-15°...+90°
Регулировка ножной секции	-90°...+0°
Регулировка спинной и ножной секций, бокового наклона, Тренделенбург	Пневматически, с помощью газовой пружины

- EN 60601-1, EN 60601-2-46 (частично применяется)
- 1650 относится к классу I в соответствии с Европейской Директивой Европейского Совета. Директива 93/42/EEC Класс I (Приложение IX)




# Решения для обеспечения оптимального потока пациентов

Merivaara – расположенная в Финляндии глобально функционирующая компания, производящая широкий диапазон больничной мебели, как, например: операционные столы, каталки для перемещения пациентов, столы для дневной хирургии, акушерские кресла-кровати, столы для осмотра, функциональные кровати и мебель для кабинетов и палат. В ассортименте также медицинские светильники для смотровых и операционных залов. Наши разнообразные решения способствуют обеспечению грамотного и экономически эффективного движения пациентов во всех отделениях современной клиники.

Будучи основанной в 1901 году, за более, чем 100-летнюю историю, Merivaara накопила богатейший опыт конструирования и производства медицинской мебели и оборудования. Удобство, надежность и функциональность наших изделий по праву оценена нашими заказчиками более, чем в 100 странах мира.

Вся продукция имеет маркировку CE. Система качества Merivaara построена согласно Европейской директиве на медицинские изделия и сертифицирована согласно требованиям стандартов качества производства ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003. Система защиты окружающей среды при производстве продукции сертифицирована согласно стандарту ISO 14001:2004.

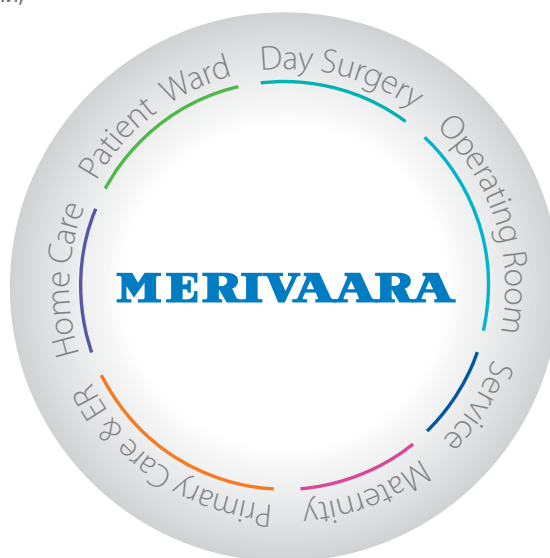

## Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND  
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144  
merivaara@merivaara.com  
www.merivaara.com

Вся информация, содержащаяся в данной брошюре, действительна на момент публикации. Составляя брошюру со всей тщательностью, Merivaara не несет ответственности за возможные в ней ошибки и неточности, и оставляет за собой право вносить изменения без уведомления. Merivaara Corp. оставляет за собой право изменять модели и вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления. Пожалуйста, обратитесь к сайту Merivaara за новейшей информацией.

Все торговые марки – собственность Merivaara, пока не установлено иное. Патенты получены или ожидаются.

©Merivaara Corp. 6006RU 112012, printed in markprint 41042 1000

